



FILTRA BAG®

FILTRA BAG®

Le **FILTRA BAG®** est un sac pour homogénéisateur conçu pour faciliter la prise d'aliquote. La membrane filtre permet aux bactéries de circuler entre les compartiments tout en maintenant séparés les plus gros résidus. C'est la solution idéale pour les échantillons qui doivent être exempts de particules solides pour l'analyse microbiologique. Son design, compatible avec tous les types d'homogénéisateurs, empêche le blocage de la pipette.

Le Filtra Bag® est un sac parfait pour utilisation dans un homogénéisateur!

Caractéristiques et avantages

- Fait de polyéthylène téréphtalate (PET) pour éliminer les risques de perforation lors du broyage
- Membrane filtre pleine grandeur d'un diamètre de pores de 330 microns pour assurer une filtration optimale des substances semi-solides ou solides
- Compatible avec les homogénéisateurs de série 400 et 3500
- Stérilisation par irradiation gamma
- Plusieurs formats disponibles




Inspiré par vos défis

LABPLAS

VISITEZ [LABPLAS.COM](https://www.labplas.com) POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS | Tél: 1.450.649.7343



FILTRA BAG® GUIDE D'UTILISATION

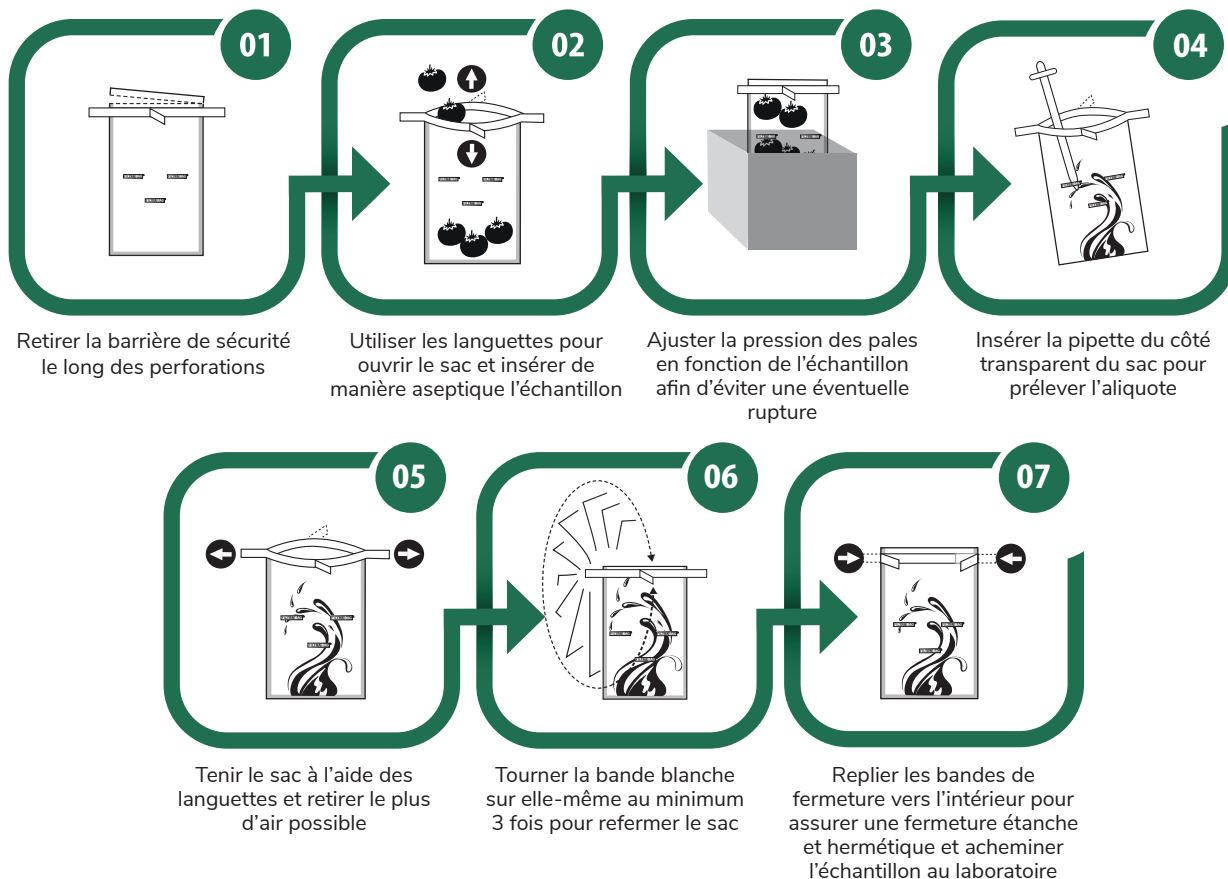

Inspiré par vos défis

LABPLAS

VISITEZ [LABPLAS.COM](https://www.labplas.com) POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS | Tél: 1.450.649.7343

